


## カートリッジ用付属品

### 真空吸引システム (バキュームボックス)


	12本掛け用	24本掛け用
商品番号	AR-12-BOX	AR-24-BOX
寸法 (cm) 縦×横×高さ	32×14.5×18	57×14.5×18
内容物 (共通)	①高密度ポリエチレン (HDPE) 製上面部 ②透明プラスチック製下面部 ③真空計 ④遠沈管 (50cc) 用ラック	⑤マニフォールドプラグ25個 (使用しない穴をふさぐ用) ⑥黄色アウターチップ 25個 ⑦白色インナーサポートチューブ 25個 ⑧20mLカートリッジ容器 (フリットなし) 25個

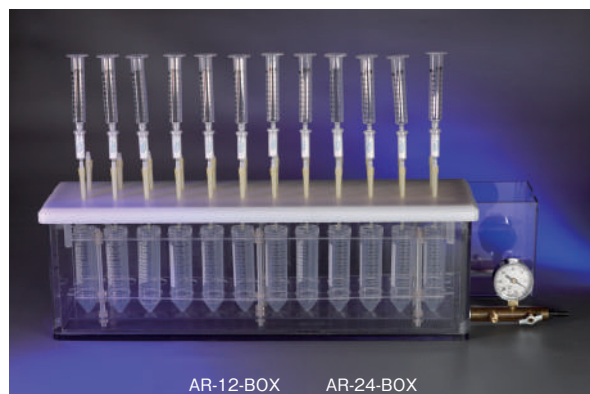

AR-12-BOX AR-24-BOX

本製品とEichrom Technologies社製の充填済カートリッジを組み合わせることで、従来の重力に任せて流すカラムを利用した方法に比べて、分析時間を半分に短縮することができます。世界的にもポピュラーな方法です。

上面部は酸にも対応できる高密度ポリエチレン (HDPE) 製であり、下面部は透明のプラスチック製のため、回収チューブ内をよく見ることができます。また、上面部は4本の脚 (高さ2.5cm) が付いているため、取り外した場合でも実験台上に置くことができ、使用時にカートリッジやチップに影響を与えることはありません。セットアップ方法や使用方法は分析法VBS01をご参照ください。

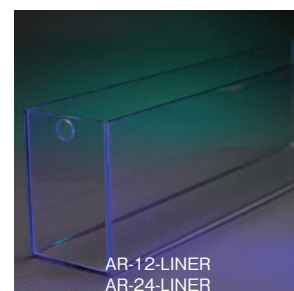

AR-12-LINER  
AR-24-LINER

### インナーライナー

	商品番号
12本掛け用	AR-12-LINER
24本掛け用	AR-24-LINER

プラスチック製で透明です。廃液の回収に使用します。

総容量 12本掛け用：約2L 24本掛け用：約4L




AR-200-RV20-F  
AR-200-RV20

### 20mLカートリッジ容器

フリット	数量	商品番号
あり	200個入	AR-200-RV20-F
なし	200個入	AR-200-RV20

注射筒のようにEichrom Technologies社製の充填済カートリッジの上部に取り付けます。カートリッジ容器はルアーロック構造になっています。また、目盛りがついているため、真空吸引システムの使用時に流速を測定しやすくなっています。

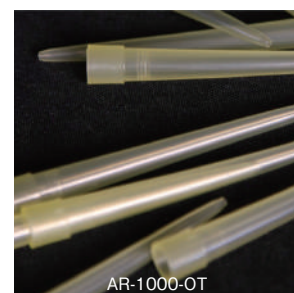

AR-1000-OT

### 黄色アウターチップ/白色インナーサポートチューブ

	数量	商品番号
黄色アウターチップ	1000個入	AR-1000-OT
白色インナーサポートチューブ	1000個入	AR-1000-TUBE-PE

真空吸引システムに充填済カートリッジを取り付ける際に使用します。各フラクションによる二次汚染を避けるため、再利用せずに使い捨ててご使用ください。



AR-1000-TUBE-PE

## カラム用付属品

### エクステンションファンネル

	数 量	商品番号
25mLエクステンションファンネル	20個入	AC-120-TK
250mLエクステンションファンネル	20個入	AC-20X-20M

25mLエクステンションファンネルは、一体成形のポリプロピレン製のリザーバーです。2mLカラムに対応します。容量：25mL

250mLエクステンションファンネルは、一体成形のプラスチックリザーバーです。5mL/20mLカラムに対応します。容量：200～250mL

### カラムコネクター

	数 量	商品番号
カラムコネクター	100個入	AC-121

2mLカラムに25mLエクステンションファンネルを繋ぐパーツです。上記AC-120-TKに含まれています。

### エンブティカラム

	2mL	5mL	20mL
商品番号	AC-141-AL	AC-50E-5M	AC-20E-20M
数量	100個入	50個入	20個入
内容物	①エンブティカラム ②底部用フリット(挿入済) ③キャップ ④上部用フリット	①エンブティカラム ②底部用フリット(挿入済) ③キャップ ④上部用フリット ⑤カラムチップ・クロージャー	

Eichrom Technologies社製充填済カラムと同じポリプロピレン製です。

2mLエンブティカラムの内径は0.8cmです。自身で充填済カラムを作製する際に使用します。

5mLエンブティカラムの内径は約1cm、20mLエンブティカラムの内径は約1.5cmです。

大量のベッドボリュームの抽出クマトグラフィーレジンは必要とする場合に使用します。

### カラムラック

	商品番号
15穴カラムラック	AC-103
12穴ラージカラムラック	AC-20M-RACK

アクリル製で透明です。15穴カラムラックは2mLカラムに対応します。寸法は縦24cm、横11.5cm、高さ16cmです。カラムから50ccの遠沈管に直接注入することができるように15個の穴が配列されています。

12穴カラムラックは5mL/20mLカラムに対応します。

### カラムチップ・クロージャー

	数 量	商品番号
カラムチップ・クロージャー	100個入	AC-130

1回の分析でカラムを2回使用する際に、カラムが乾燥しないようカラムの先端に取り付けます。(例：分析法 SRW01、Sr-89/90 in Water)柔軟性のあるプラスチック製のスリーブです。

## その他製品一覧

	商品番号
真空吸引システム用 交換ゲージ/バルブ	AR-01-GAUGE-PVC
12本掛け真空吸引システム用 交換ラック	AR-12-RACK
12本掛け真空吸引システム用 交換ふた	AR-12-LID
12本掛け真空吸引システム用 交換上部サポート	AR-12-TS
24本掛け真空吸引システム用 交換ラック	AR-24-RACK
24本掛け真空吸引システム用 交換ふた	AR-24-LID
24本掛け真空吸引システム用 交換上部サポート	AR-24-TS
ストップコック(12個入)	AR-12-SC-PC

